


PRECISIE BALANS, PRO type 9432

Laboratorium balansen

Uitvoeringen: 750 g, 200/2000 g, 1500 g, 4500 g, 6000 g

Laboratorium balans voor industriële en medische toepassing

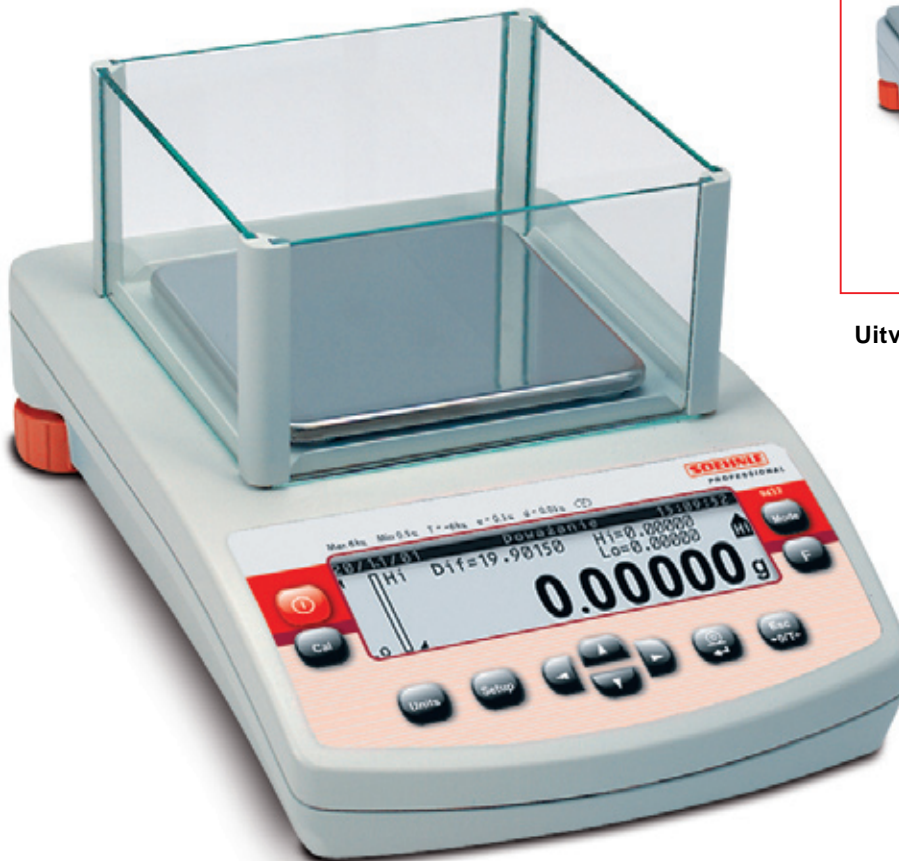

Uitvoering: 1500 g, 4500 g, 6000 g

Uitvoering: 750 g, 200/2000 g, met windkap optie

- > Weegvermogens: 200 g . . . 6000 g
- > Aflezing: 0,001 g . . . 0,01 g
- > Groot grafisch, verlicht display
- > IJkwaardig klasse II
- > Automatische interne kalibratie
- > Zeer uitgebreide weegprogramma's

PRECISIE BALANS, PRO type 9432

Laboratorium balansen

Uitvoeringen: 750 g, 200/2000 g, 1500 g, 4500 g, 6000 g

Beschrijving



De ijkwaardige balansen van de 9432 Pro serie zijn de topklasse in dit segment. De weegbereiken en nauwkeurigheid zijn vergelijkbaar met de standard 9431 serie, maar door de uitgebreide weegprogramma's zijn de toepassingsmogelijkheden veel omvangrijker.

Ook deze balansen zijn uitgevoerd met automatische interne kalibratie, die plaatsvindt:

- bij inschakelen en steeds na 3 uur
- bij wijziging van de omgevingstemperatuur maar kan ook op ieder moment handmatig gestart worden

Weegfuncties:

- > Normaal wegen en tarreren
- > Wegen in percentage
- > Checkwegen
- > Dosereren
- > Receptuur afwegen
- > Dieren wegen
- > Soortelijk gewicht bepaling (750 g en 200/2000 g typen)
- > Statistiek
- > GLP rapportage
- > Onderweeg voorziening
- > Programmeerbare printerafdruk met gebruikersnaam, project naam, datum, tijd

Technische gegevens:

- > Weegbereiken: zie tabel: "bestelgegevens" hieronder
- > Roestvast stalen weegvlak, afmetingen:
 - 750 g en 200/2000 g type : 12,8 x 12,8 cm
 - 1500 g, 4500 g, 6000 g type : 19,5 x 19,5 cm
- > CE IJktoelating klasse II
- > Groot grafisch display met achtergrondverlichting
- > Stabiliseringstijd ca. 2 sec., filterinstelling afhankelijk
- > Automatische interne kalibratie (justering)
- > RS 232 dataport en PS2 toetsenbord aansluiting
- > Interne datum / tijd klok
- > Menu in 6 talen instelbaar
- > Omgevingstemperatuur: +15° . . .30° C
- > Voeding: net-adaptor 9 /230 V
- > Externe 2e display aansluiting.

Opties:

- > IJkwettelijk gekeurde levering, CE klasse II
- > Soortelijk gewicht bepaling set (type ...010 en ...020)
- > Verhogingsframe voor onderweging
- > Thermische printer met tijd klok of statistiek functie
- > Papierstrook printer
- > Windkap, bij 750 g en 200/2000 g uitvoeringen
- > Anti trillingtafel van gelakt staal
- > PC software voor data ontvangst en opslag

Bestel gegevens

Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling per		Afmetingen	Afmetingen
		d	e	toestel	weegvlak
9432.01.010 *)	200 / 2000 g	0,001 g / 0,01 g	0,01 g / 0,1 g	34 x 21 x 8 cm	12,8 x 12,8 cm
9432.01.020	750 g	0,001 g	0,1 g	34 x 21 x 8 cm	12,8 x 12,8 cm
9432.01.030	1500 g	0.01 g	0,1 g	34 x 21 x 8 cm	19,5 x 19,5 cm
9432.01.040	4500 g	0.01 g	0,1 g	34 x 21 x 8 cm	19,5 x 19,5 cm
9432.01.050	6000 g	0.01 g	0,1 g	34 x 21 x 8 cm	19,5 x 19,5 cm

*) dubbel weegbereik, automatisch omschakelend

FLD 9431-nl 11/09 © Weegtechniek Holland B.V. – Technische wijzigingen voorbehouden

Importeur Soehnle Profesional Benelux:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
 Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
 Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
 Website www.soehnle.nl

Garantie en service worden in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional in Backnang in Zuid Duitsland.