


PRECISIE WEEGSCHAAL type SA 230



300 gram
600 gram
1200 gram

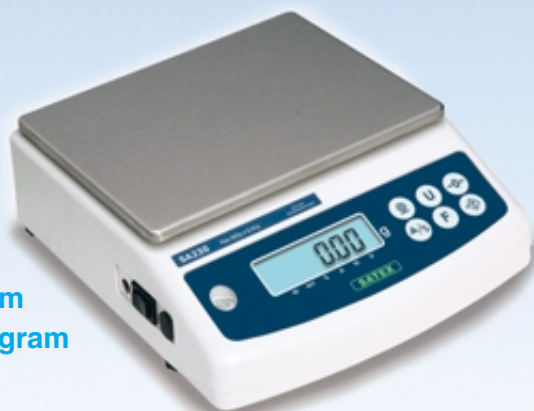

1550 gram
3100 gram

- ▶ Weegvermogens: 300 g ... 3000 g
- ▶ Nauwkeurigheid : 0,01 g ... 0,1 g
- ▶ Weegvlak : Ø 12 cm .. 18 x 14 cm
- ▶ Snel kalibratie toets
- ▶ Ingebouwde accu en lader
- ▶ Data uitgang RS 232 (optie)

SATEX

- ▶ **Precisie wegen**
- ▶ **Artikelen tellen**
- ▶ **In % wegen**
- ▶ **PC aansluiting (optie)**
- ▶ **Snel kalibratie toets**



Overzichtelijke bediening en aflezing
(1/3 ware grootte)



Roestvast stalen weegvlak

ABS behuizing

Helder LCD display met achtergrondverlichting

ELEKTRONISCHE PRECISIE BALANS

AFLEZING

Contrastrijke, 13 mm hoge LCD cijfers met -automatische- lichtblauwe achtergrondverlichting. Displaysnelheid 5 Hz.

De aflezing is tarreerbaar (nulstellen) over het hele weegbereik. De automatische nulstelling houdt de aflezing bij een leeg weegvlak op nul. Kleine variaties van 1 of 2 schaaldelen (instelbaar) rond nul worden voortdurend gecorrigeerd.

De nulstelautomaat is uitschakelbaar om heel nauwkeurig vanaf nul te kunnen wegen.

BEDIENING

- tarren (nulstellen over hele bereik)
- nulstellen
- tel-wegen en % wegen
- omschakelen aantal / gewicht

- omschakelen gewichtseenheid
- printen / data uitzenden (optie)
- snel - kalibratie

MENU FUNCTIES

- Nulstel automaat : uit - aan
- Display verlichting : uit - aan - auto
- Auto off weegschaal : tijd instelbaar
- RS 232 poort (optie) : 2400-9600 Bd
- Printer/uitzendmode : toets - auto - continu
- Volledige kalibratie en snel-kalibratie

VOEDING

Ingebouwde accu en acculader voor max. 75 uur zelfstandig bedrijf. Levering inclusief 230 V net-adapter.

Na een (instelbare) tijd niet in gebruik te zijn geweest schakelt de weegschaal automatisch uit om de accu te sparen. Deze auto off functie is uitschakelbaar.

UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS	
Bestel nr.	Weegvlak	Weegvermogen	Aflezing
SA 230.03.01	Ø12 cm	300 g	0,01 g
SA 230.06.01		600 g	0,01 g
SA 230.06.02		600 g	0,02 g
SA 230.12.02	18 x 14 cm	1200 g	0,02 g
SA 230.15.05		1550 g	0,05 g
SA 230.31.10		3100 g	0,1 g
SA 230.xx.xx.RS	Uitvoering met RS 232 uitgang, 9-polige male D-connector		
Meetnauwkeurigheid	Max 2 schaalverdelingen		
Afmetingen	22 x 20 x 7 cm (bxdxh) eigen gewicht 1,9 kg		
Constructie	Roestvast stalen weegvlak, ABS behuizing, stalen bodemframe met 4 stelvoeten en waterpas. Krachtopnemer met overlastbeveiliging.		
Voeding	Ingebouwde accu en acculader voor max 75 uur zelfstandig bedrijf (15 uur bij continu display verlichting). Laadtijd 8 uur. Inclusief 230 V net-adapter.		
Auto off	Automatische uitschakeling weegschaal bij niet in gebruik, instelbaar: uit, 5, 10, 20, 30 minuten		
Printer / data uitgang (optie)	RS 232, Baudrate 2400 of 9600, geen parity, CR+LF Instelbaar: 1 x uitzenden na druktoets bediening, of automatisch 1 x na een weging, of continu uitzending		
Verpakking	Kartonnen doos in kartonnen omdoos, 38 x 45 x 25 cm (bxdxh), bruto 3,4 kg		
Kalibratie gewichten (optie)	Keuze uit 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg (niet inclusief) zie: www.ijkgewichten.nl		